


Правила использования бандажа у стомированных пациентов

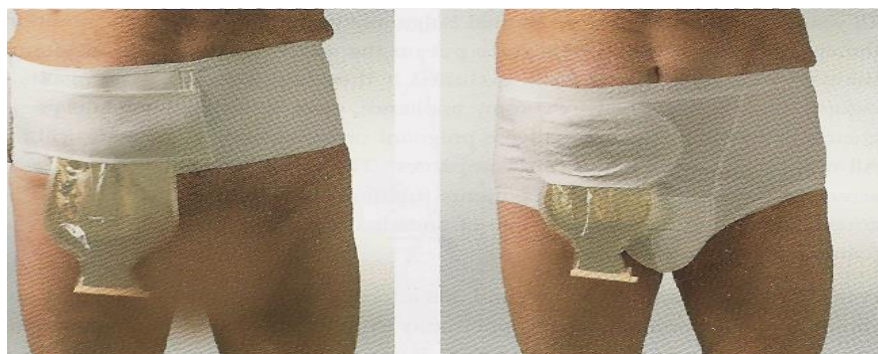

На **рисунке 1** изображены готовые бандажи для пациентов со стомой, но и на обычном эластичном послеоперационном бандаже можно сделать аналогичное щелевидное отверстие для мешка.



рис. 1

Послеоперационный бандаж - это не корсет. (См. **рис.2**)


рис.2



рис. 3.

Бандаж надевается в положении лежа, поверх калоприемника, без особого натяжения, поэтому он не сдавливает брюшную стенку (и стому в том числе), а лишь поддерживает ее.

В послеоперационном эластичном бандаже, после надевания, прорежьте щелевидное отверстие на уровне нижнего края пластины калоприемника, или на 3-4 см ниже, так, чтобы через него можно было вытащить конец мешка, не более 1/3-1/2 его длины. (См. **рис. 3.**)

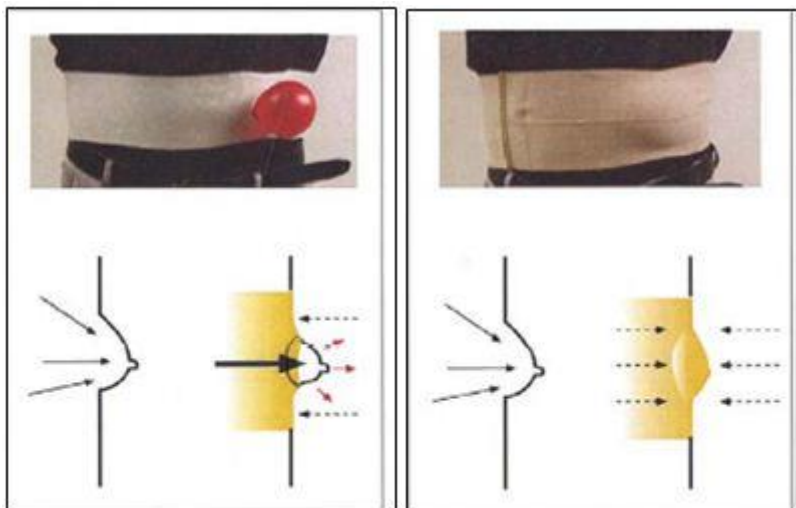

Вырезание отверстий в бандаже в проекции стомы абсолютно недопустимо. Это создает предпосылки для формирования парастомальной грыжи и пролапса (выворачивания, выпадения кишки через стому). (См. **рис.4.**)

рис. 4

Важно правильно выбрать размер бандажа, он не должен мешать при ходьбе, сдавливать грудную клетку. Следуйте инструкции по применению данного изделия.